




techmudent

WE LIVE DENTAL

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG NASS-/TROCKENABSAUGUNG

NASSABSAUGUNG ohne Amalgamabscheidung

Dezentrale Separation von Luft und Wasser

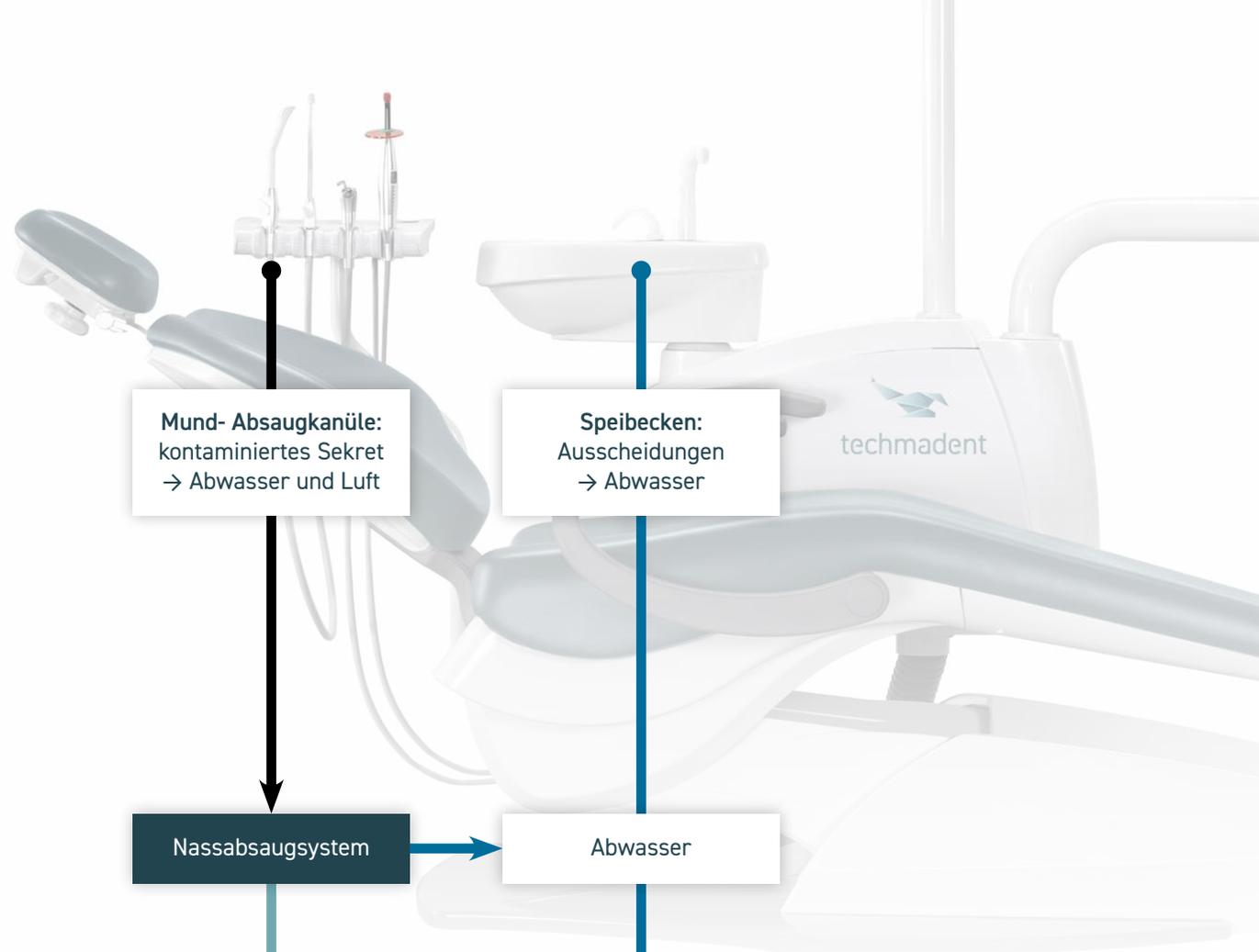

Mund- Absaugkanüle:
kontaminiertes Sekret
→ Abwasser und Luft

Speibecken:
Ausscheidungen
→ Abwasser

Nassabsaugsystem

Abwasser

Abluft

Kanalisation


Umgebungsluft

Kläranlage

- Wasser und Luft
- Wasser
- Luft


NASSABSAUGUNG mit Amalgamabscheidung

Dezentrale Separation von Luft und Wasser
mit Amalgamabscheidung

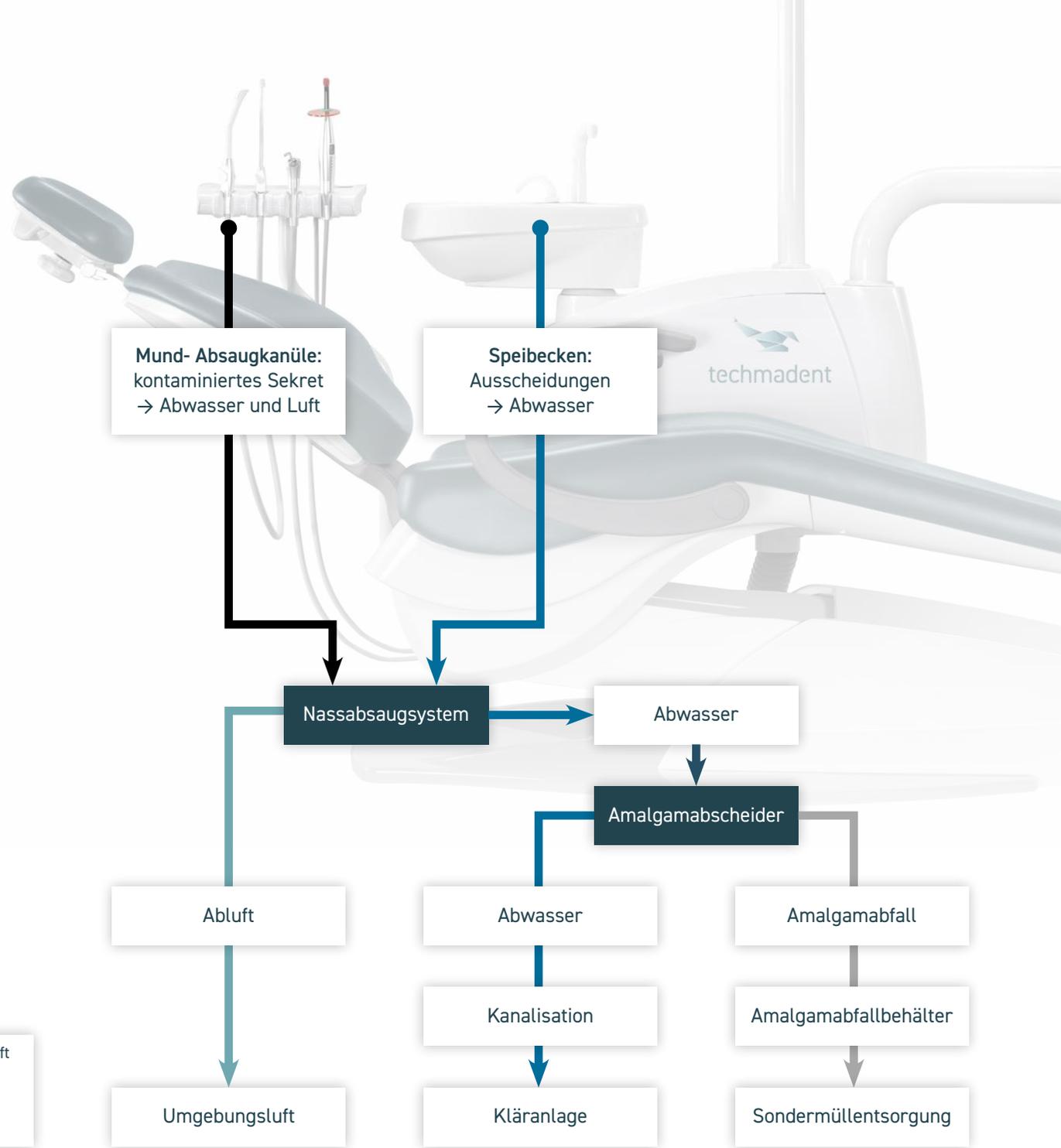

TROCKENABSAUGUNG ohne Amalgamabscheidung

Reine Separation von Luft und Abwasser
in der Behandlungseinheit

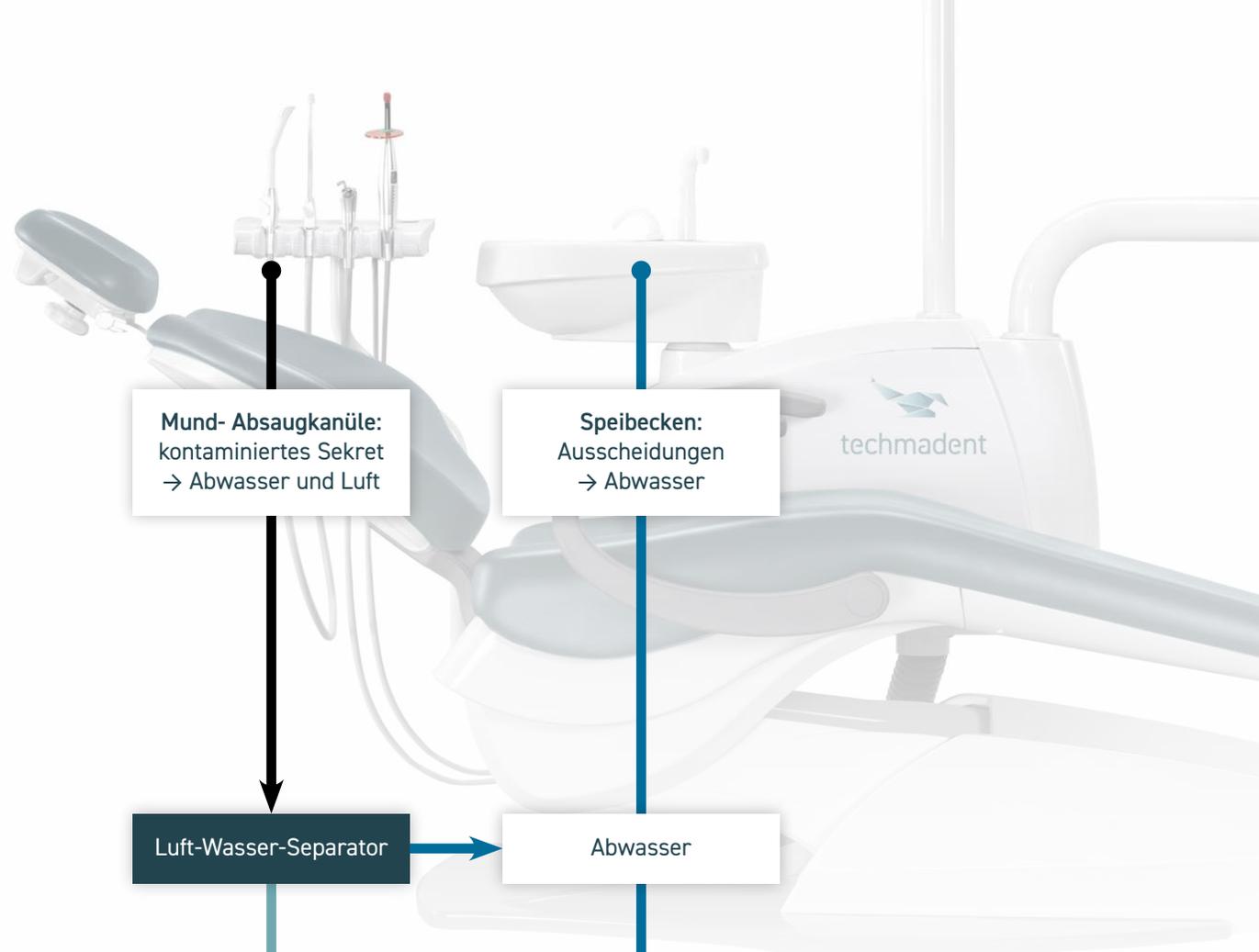

Mund- Absaugkanüle:
kontaminiertes Sekret
→ Abwasser und Luft

Speibecken:
Ausscheidungen
→ Abwasser

Luft-Wasser-Separator

Abwasser

Abluft

Trockenabsaugsystem

Kanalisation


Umgebungsluft

Kläranlage

- Wasser und Luft
- Wasser
- Luft

TROCKENABSAUGUNG mit Amalgamabscheidung

Separation von Luft und Wasser
mit Amalgamabscheidung in der
Behandlungseinheit

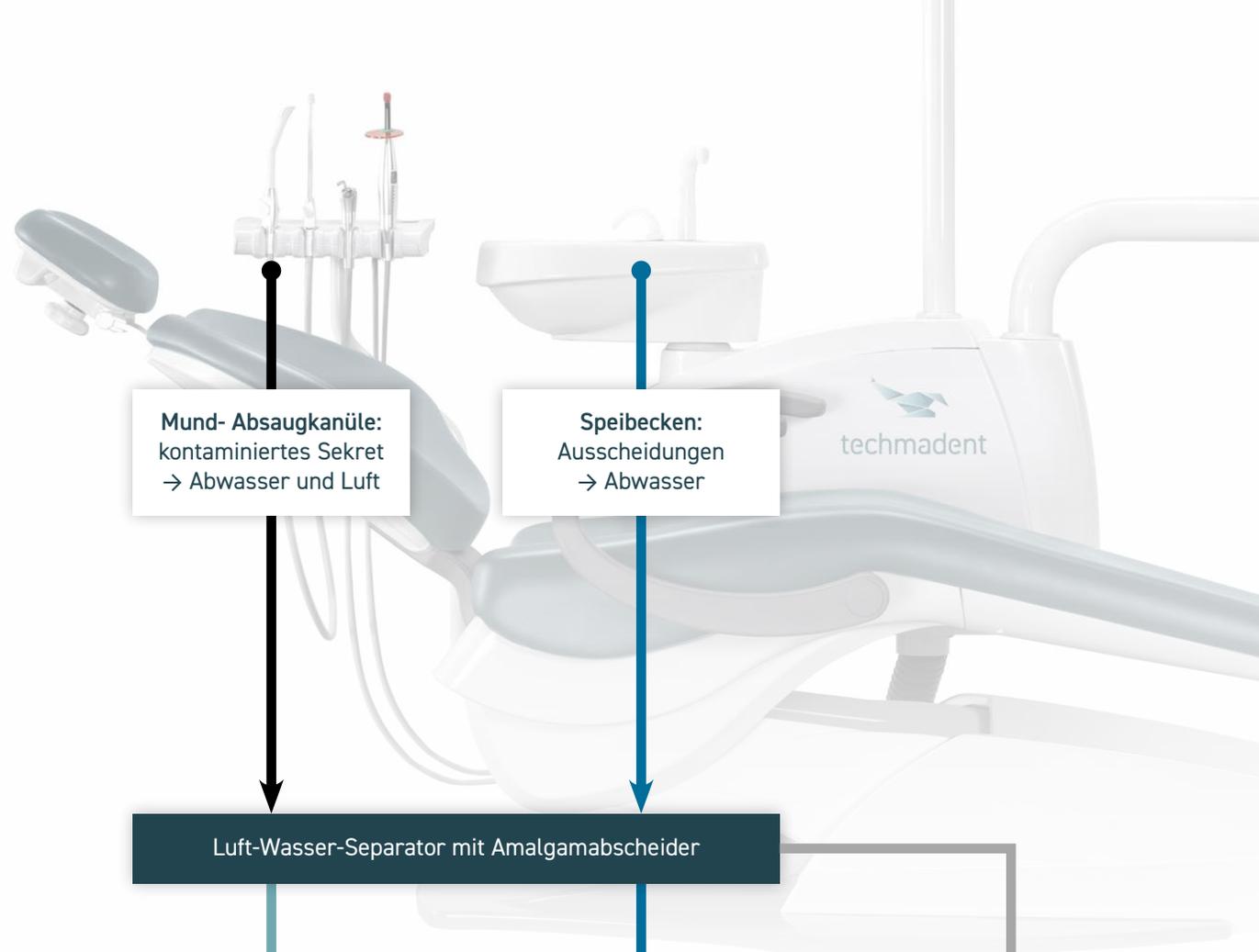

Mund- Absaugkanüle:
kontaminiertes Sekret
→ Abwasser und Luft

Speibecken:
Ausscheidungen
→ Abwasser

Luft-Wasser-Separator mit Amalgamabscheider

Abluft

Abwasser

Amalgamabfall

Trockenabsaugsystem

Kanalisation

Amalgamabfallbehälter

Umgebungsluft

Kläranlage

Sondermüllentsorgung

- Wasser und Luft
- Wasser
- Luft
- Amalgam